



Ciljna grupa

Monofokalna leća sa perifernim defokusom za djelimičnu kontrolu progresije miopije. Uzrast djece od 4 do 18 godina.

Tri različita dizajna PolinoMyo leće

PolinoMyo 25

- centralno vidno polje između 9 mm i 10 mm, u zavisnosti od refraktivnih vrijednosti
- kružni defokus 2,5 D
- uzrast djece od 4 do 8 godina

Tehnologija

OPTO Plus MyoStop

Poručivanje dioptrija

1/4

PolinoMyo 16

- centralno vidno polje između 10 mm i 12 mm, u zavisnosti od refraktivnih vrijednosti
- kružni defokus 1,6 D
- uzrast djece od 9 do 13 godina

Način izrade


Unutrašnja izrada monofokalne leće. Dizajn leće je decentriran 2,5 mm u odnosu na geometrijski centar leće.

Način poručivanja

- Forma okulara
- IPD, OCHT, DBL


PolinoMyo 10

- centralno vidno polje između 11 mm i 18 mm u zavisnosti od refraktivnih vrijednosti
- kružni defokus 1,0 D
- uzrast djece od 14 do 18 godina

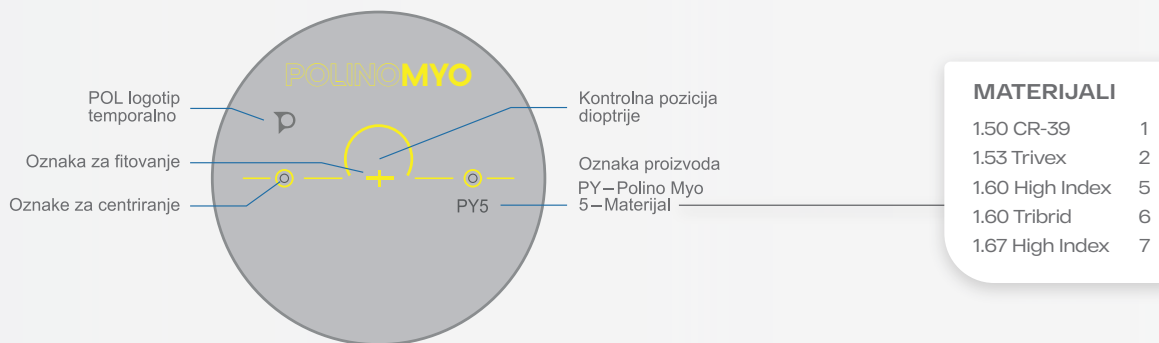

Polino Myo defokus leća

Defokus na osnovu dječjeg uzrasta

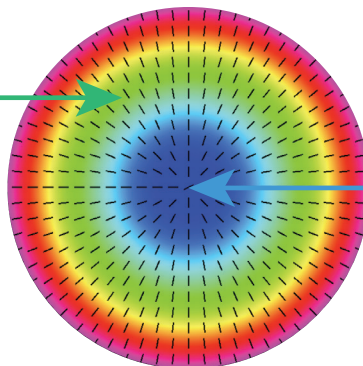

Vidno polje sa RX dioptrijom